

**SiE**GEN

[www.siegen.cl](http://www.siegen.cl)

**SiE**GEN



ICAP

**Casco Regenerador Capilar**  
SG-6700

## ÍNDICE

1. Introducción
2. Datos técnicos
3. Componentes del aparato
4. Instrucciones de seguridad importantes
5. Contraindicaciones
6. Instrucciones de carga
7. Instrucciones de uso
8. Cuidados y limpieza
9. Garantía y condiciones generales

## 1. INTRODUCCIÓN

iCAP es un innovador y revolucionario híbrido en forma de casco que promete restaurar a pequeña escala una incipiente alopecia en un periodo de meses.

Nuestro iCAP funciona con tecnología láser de baja intensidad ejerciendo una terapia reparadora sobre los folículos pilosos, donde nace el cabello. No genera calor evitando efectos secundarios.

Cuenta con 180 Diodos LED, con una profundidad de onda del láser de 650 nm, que fácilmente penetra a los folículos pilosos, a 2 mm aproximadamente, trabajando directamente en la raíz.

El folículo piloso absorbe el calor y promueve la circulación sanguínea. Con esto aumentan los nutrientes importantes como el ATP y elimina productos nocivos. El ATP mejora el metabolismo y actividad celular, transformando los folículos pilosos en saludables y hermosos.

iCAP puede ser usado en la comodidad del hogar, es indoloro y es compatible para ser usado en forma paralela con otros tratamientos que mejoran la pérdida del cabello.

## 2. DATOS TÉCNICOS

**Modelo:** SG 6700

**Bi-voltaje:** 100V-240V~ 50/60 Hz

**Uso:** Recargable

**Apagado automático:** 25 minutos


**Batería:** DC 5V 1000mAH

**Tiempo de carga completa:** 3,5 horas

### 3. COMPONENTES DEL APARATO

1. Botón encendido/apagado – Luz indicadora de funcionamiento - Luz indicadora de carga
2. Cuerpo del aparato
3. Puerto de conexión para cable USB
4. Luces Láser Led

\*Incluye funda para guardar y Cable con puerto USB

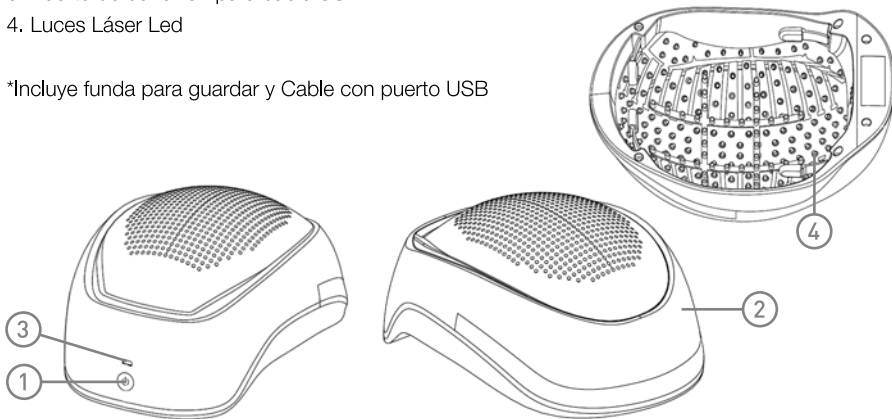

### 4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato, luego guarde las instrucciones.
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni otro líquido, tampoco el cable o cualquier parte del aparato.
- 3.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 4.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 5.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 6.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 7.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 8.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

9.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

10.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

11.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

12.- Nunca guarde el aparato en lugares donde llegue luz del sol directamente, con mucha humedad, polvo o con altas temperaturas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0°C - 40°C.

13.- Evite golpear el aparato.

14.- Este aparato es sólo para uso doméstico.

15.-No use sobre el cabello mojado o húmedo.

16.-No use al exterior.

**IMPORTANTE:**

No mire directamente las luces Láser mientras estén encendidas.

## 5. CONTRAINDICACIONES

Este aparato no se puede utilizar en:

- Niños menores de 18 años de edad.
- Personas con dermatitis.
- Personas con eczema, folículos inflamados, heridas abiertas, herpes, abrasiones, hematomas en zonas a tratar.
- Personas con piel atópica.
- Personas con infección por hongos u otros.
- Personas con enfermedades cutáneas como cáncer de piel entre otros.
- Mujeres en periodo de lactancia o embarazo.
- Personas con historial de foto sensibilidad o diabetes.
- Personas con numerosos lunares atípicos en la zona a tratar.
- Desorden de colágeno o propenso a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.

- Desorden vascular, presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- Si le han operado en la zona a tratar.
- Si padece de epilepsia, diabetes, lupus eritematoso, porfiria o enfermedad cardiaca.
- Desorden sanguíneo.
- Personas a las que la luz le produzca epilepsia o migrañas crónicas.
- Si padece alguna enfermedad inmunodepresora, incluida el VIH.
- Sobre verrugas, tatuajes o maquillaje permanente.
- Personas con fiebre, hipertensión o alguna anomalía en su cuerpo.

**ADVERTENCIA:** si no tiene seguridad de poder utilizar este aparato, le recomendamos que consulte con su médico.

## 6. INSTRUCCIONES DE CARGA

Antes de usarlo por primera vez, cargue el aparato completamente. El tiempo de carga completa es de 3,5 horas aproximadamente.

Este aparato se carga conectándolo a algún dispositivo con puerto USB.

1. Conecte el cable al puerto de conexión ubicado en la parte de atrás del cuerpo del aparato.
2. Conecte el cable a un dispositivo o enchufe con puerto USB incluido. La luz indicadora de carga se encenderá en color rojo.

## 7. INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato es aplicable sólo a algunos casos de pérdida de cabello:

- Alopecia seborreica.
- Caída del cabello por estrés.
- Pérdida de cabello post-parto.
- Solidificación después de un trasplante
- Pérdida de cabello por quimioterapia.
- Cabello débil y delgado.
- Cabello con exceso de grasa, prurito y reseco.
- Poco cabello desde el nacimiento.

**NOTA:** Pueden usarlo hombres y mujeres.

**ADVERTENCIA:** Este tratamiento no es recomendable para AFRODESCENDIENTES, ya que puede ser que el tratamiento no haga efecto sobre este tipo de piel.

El siguiente dibujo muestra el rango de aplicación para hombres y mujeres:



**PRECAUCIÓN:** Nunca use sobre el cabello mojado o húmedo.

**NOTA:** Este aparato va a funcionar más eficientemente en cabellos cortos.

1. Presione el botón encendido/apagado por 2 a 3 segundos. Escuchará un “beep” y la luz indicadora de funcionamiento se encenderá azul en forma intermitente. El aparato está listo para ser usado.
2. Coloque el casco en su cabeza. La posición correcta es con el botón encendido/apagado hacia atrás. Automáticamente las 180 luces Láser en el interior del casco se encenderán en color rojo parpadeando.

**NOTA:**

- Este aparato se apaga automáticamente en 25 minutos.
- Cada 30 segundos sonará un “beep” indicando que el aparato está en funcionamiento.
- El aparato se apagará automáticamente si se lo saca durante el funcionamiento.
- Si lo vuelve a colocar en su cabeza antes de que hayan pasado 6 minutos, el casco volverá a encender las luces Láser y continuará el tratamiento.
- Si no lo vuelve a colocar en su cabeza, el aparato se apagará automáticamente.

**PRECAUCIÓN:** No mire las luces mientras el aparato esté funcionando.

### **Tratamiento**

iCAP debe usarse máximo 3 veces a la semana, no más de 25 minutos diarios.

El tiempo del tratamiento va a depender de la situación en la que se encuentre cada persona.

Este tratamiento no es rápido, por lo que el usuario debe tener paciencia y ser persistente.

Usualmente después de 2 meses de tratamiento el cabello estará más resistente. Luego 3 a 6 meses para que este se regenere.

Recién después de 1 a 1,5 años logrará los mejores resultados de regeneración capilar, ya que en el tiempo el cabello se va fortaleciendo y creciendo más sano.

**PRECAUCIÓN:** No se recomienda hacer el tratamiento combinándolo con drogas, excepto si algún medico las indique. Es mejor combinar el tratamiento con algún shampoo que elimine la grasa protectora del cabello.



**NOTA:** Dejar de usar el aparato no causa pérdida de cabello. De todas formas se recomienda usarlo regularmente para mantener el cabello fortalecido.

## 8. CUIDADOS Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, asegúrese que el aparato está apagado y desenchufado de la corriente eléctrica o dispositivo donde esté cargando.
2. Limpie el aparato con un paño suave para eliminar toda la humedad y transpiración. Deslice el paño muy suavemente.

**NOTA:** Para limpiar la suciedad puede usar el paño suave con algún detergente neutro humedecido con agua tibia.

3. Guarde el aparato en un lugar seguro, fresco y seco.

## 9. GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.