

SIEGEN

www.siegen.cl

SIEGEN



DEPILADORA IPL
SG-9407



ÍNDICE

1. Introducción.
2. Datos técnicos.
3. Componentes del aparato.
4. Instrucciones de seguridad importantes.
5. Contraindicaciones.
6. Instrucción de uso.
7. Tratamiento.
8. Garantía y condiciones generales.

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestra depiladora IPL SG-9407 y bienvenido a Siegen.

La eliminación del vello basada en la emisión de pulsos de luz es uno de los métodos más efectivos para tratar el vello corporal no deseado con los resultados más duraderos. Este sistema le ofrece una disminución y retardo duradero del crecimiento del vello para lograr una piel suave como seda.

Gracias a esta nueva tecnología, ud. podrá hacer el tratamiento cómodamente en casa y cada vez que lo desee. Este aparato fue diseñado para ser utilizado no sólo por mujeres, también puede ser utilizado por varones.

La lámpara de esta depiladora no necesita recambio, ya que es de alto rendimiento. Ésta puede generar hasta 600.000 pulsos, lo que debe permitirle mantener los resultados de manera continua durante al menos 5 años*.

La Tecnología Ice Sense es especial e innovadora. Enfría la placa de contacto con la piel entre los 0°C a 10°C, la que al deslizarla por la zona en tratamiento reduce considerablemente la sensación de calor generado por el mismo aparato logrando que el tratamiento sea más comfortable.

*de acuerdo al uso regular y régimen de tratamiento recomendado para cada usuario.

2. DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 9407

Lámpara de alto rendimiento: 600.000 pulsos

Longitud de onda: 510nm -950nm

Energía: 6 j/cm²

Voltaje: 100V-240V~ 50/60 Hz

Potencia: 48 watt

Frecuencia: 1-2 Hz

Sistema de alimentación: Uso enchufada

Tamaño ventanas (zona emisora de luz): 3,84 cm²

Peso neto: 0,32 kg


Modo Detección:

- Detector color de piel
- Detector de contacto

Filtro UV integrado

3. COMPONENTES DEL APARATO

1. Botón emisor de luz pulsada intensa
2. Botón nivel de intensidad
3. Botón encendido/apagado
4. Pantalla LCD indicadora de cantidad de pulsos
5. Selector de modo de enfriamiento Ice Sense
6. Entrada de aire
7. Detector de color de piel
8. Ventana emisora de pulsos de luz pulsada
9. Placa de contacto con la piel / tecnología Ice Sense
10. Salida de aire

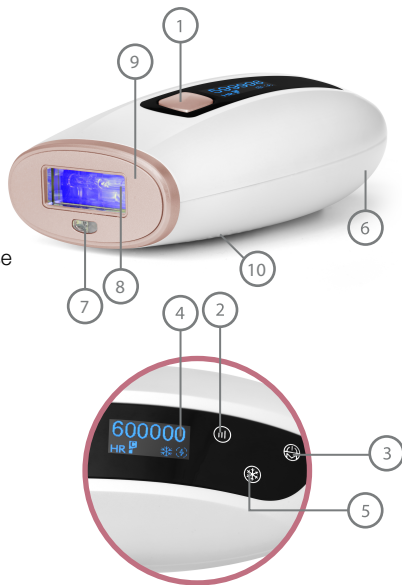

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 3.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 4.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 5.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 6.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 7.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 8.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

9.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

10.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

11.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

12.- Nunca guarde el aparato en lugares donde llegue luz del sol directamente, con mucha humedad, polvo o con altas temperaturas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0°C - 40°C.

13.- No use el aparato cerca de bañeras, duchas u otros contenedores de agua. Este aparato no es resistente al agua.

14.- Evite golpear el aparato.

15.- Compruebe que nada impida el paso del aire de las ranuras de ventilación.

16.- Evite guardar el aparato en zonas con fuertes campos magnéticos o con ondas electromagnéticas.

ADVERTENCIA

Este aparato no se puede utilizar en:

- Niños menores de 14 años de edad.
- Niños entre los 15 a 18 años, pueden usarlo sólo con el consentimiento y ayuda de los padres.
- Personas con enfermedades del corazón, hipertensión, cáncer o enfermedades infecciosas de la piel.
- Personas con historial de foto sensibilidad o diabetes.
- Personas que haya utilizado otros métodos de depilación láser en las últimas 6 semanas.
- Mujeres embarazadas, en periodo menstrual o sobre cicatrices.
- Personas que han tomado aspirina u otro inmunosupresor.
- Personas con piel regenerada, o que hayan consumido ácidos de fruta (AHA), ácido salicílico (BHA), Isotretinoína y ácido Rhododendronico.
- Personas que utilicen cualquier medicamento, crema o estén en tratamientos para el acné.
- Personas que han estado expuesta a una intensa luz solar en las últimas 2 semanas.

5. CONTRAINDICACIONES

Nunca utilice si está embarazada.

Nunca utilice este aparato si no tiene el color de piel o vello adecuado, es decir:

- Si el color natural del vello en la zona de tratamiento es rubio claro, blanco, gris o pelirrojo.
- Si su piel es de tipo VI (Razas negras, no se queman nunca la piel, se pigmentan intensamente, siempre presentan reacción de pigmentación inmediata).

Nunca utilice si padece alguna de las enfermedades siguientes:

- Cáncer a la Piel (o tiene antecedentes), o ha tenido radio o quimioterapia en los últimos 6 meses.
- Lesiones pre cancerígeno o numerosos lunares atípicos en las zonas a tratar.
- Desorden de colágeno o propenso a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.
- Desorden vascular, presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- Piel foto sensible, reacción alérgica o erupciones.
- Tiene infecciones, psoriasis, eccemas, quemaduras, folículos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes o lesiones y hematomas en las zonas a tratar.
- Si le han operado en la zona a tratar.
- Si padece de epilepsia, diabetes, lupus eritematoso, porfiria o enfermedad cardiaca.
- Desorden sanguíneo.
- Si padece alguna enfermedad inmunodepresora, incluida el VIH.

- Si está tomando medicamentos. Consulte a su médico tratante.

Nunca utilice este aparato en las siguientes zonas del cuerpo:

- Pezones, Aureolas, labios menores, vagina, ano, interior de los orificios nasales y orejas.
- Párpados.
- Escroto.
- Cerca o sobre algún implante de silicona, marcapasos, vías de inyección subcutánea o piercing.
- Sobre lunares, pecas, venas varicosas, zonas de pigmentación más oscura, cicatrices, o anomalías cutáneas sin antes consultar a su médico.
- Verrugas, tatuajes o maquillaje permanente.
- Injerto.
- Zona que use desodorante de acción prolongada.

Nunca utilice si ha estado expuesto al sol recientemente (últimas 2 semanas), aun cuando haya utilizado bronceador.

Precaución:

Si no tiene seguridad de poder utilizar este aparato, le recomendamos que consulte con su médico.

7. INSTRUCCIONES DE USO


Test de prueba de energía

Antes de comenzar con el tratamiento, 24 horas antes, realice una prueba con el aparato sobre su brazo para probar la reacción en su piel. Comience con el nivel de intensidad de luz más bajo y vaya subiendo gradualmente hasta llegar al nivel adecuado de acuerdo con su tono de piel y vello; y por sobre todo a su nivel de sensibilidad. Repita este proceso de 3 a 5 veces.


Después de estas 24 horas, si percibe alguna anomalía en su piel como enrojecimiento severo, hinchazón, irritación o cualquier otra molestia, no utilice el aparato antes de consultar con su médico especialista.

Si, por el contrario, la prueba no muestra ninguna anomalía, inicie el tratamiento.


1. Conecte el cable al aparato y luego a la corriente eléctrica. Automáticamente aparecerá en la pantalla LCD SIEGEN
2. Para encender la depiladora IPL presione el botón encendido/apagado durante 35 segundos para que el dispositivo comience a funcionar con el sonido de la rotación del ventilador. La pantalla LCD mostrará la información por defecto. El símbolo encendido/apagado parpadeará mientras la energía se restituye. La depiladora sólo podrá emitir disparos de luz una vez el símbolo deje de parpadear.

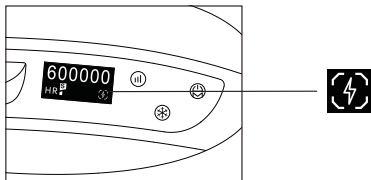

3. Para seleccionar el modo Ice Sense presione el botón selector de enfriamiento sólo 1 segundo. Si desea apagarlo, vuelva a presionar el botón selector de enfriamiento otra vez.

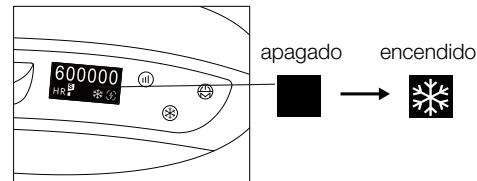

4. Para seleccionar el modo de disparos continuos sólo debe presionar por 1 segundo el botón selector de modo de disparos. La S que aparece en la pantalla cambiará a C. En el modo C la depiladora emitirá disparos de luz en forma continua mientras la desliza por la piel. Para cambiarla a modo de disparos únicos, presione nuevamente el botón selector de modo de disparos por 1 segundo. La C cambiará a S en la pantalla LCD. En este modo S la depiladora sólo emitirá disparos de luz cada vez que ud. presione el botón emisor de disparos de luz.

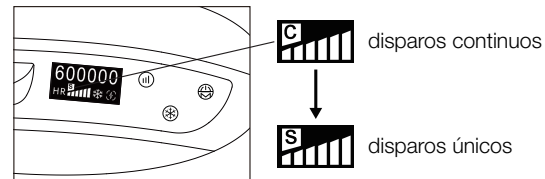


5. Este aparato tiene 6 niveles de intensidad.

Para seleccionar el nivel de intensidad presione el botón selector de niveles de intensidad por un segundo. Presione la cantidad de veces hasta llegar al nivel deseado.

En la pantalla LCD se verá las barras de distintos tamaños según el nivel seleccionado.

Nivel más bajo es la barra más pequeña. Nivel 6 más alto aparecerán 6 barras.

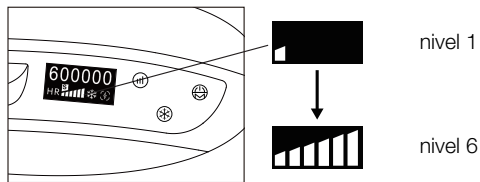

Precaución:


Siempre comience el primer ciclo de tratamiento en el nivel 1. Puede ir aumentando el nivel de intensidad de uno en uno en los siguientes ciclos de tratamiento. Aumente al nivel indicado según su tono de piel y vello, o hasta que su sensibilidad lo permita. Nunca deberá sentir dolor durante el tratamiento.

Nota:

Este aparato está programado desde fábrica para que la intensidad de la luz pulsada cada vez que encienda el aparato empiece en nivel seleccionado en el último uso.

6. La pantalla LCD mostrará la cantidad de disparos que tiene la depiladora.

Cada disparo de luz que se emita se irá descontando de este indicador de cantidad de disparos.

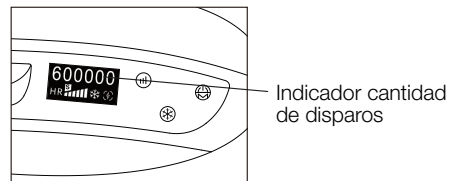

7. Coloque la ventana emisora de luz sobre la piel en una posición de 90° respecto a la superficie. Una vez la ventana emisora de luz está 100% en contacto con la piel entonces el aparato estará listo para emitir un disparo.



Nota:

Asegúrese de que la piel esté uniforme y sin arrugas.

Nota:

Si el color de piel es muy oscuro quedando fuera del rango de protección, automáticamente se encenderá el ícono ! en la pantalla LCD y el disparo de luz no podrá ser emitido.



8. Una vez finalizado el tratamiento, apague el aparato presionando el botón encendido/apagado por 35 segundos. Luego desenchufe de la corriente eléctrica.

Nota:

Este aparato se apagará automáticamente después de 5 minutos que no esté en uso

Nota:

- Después del primer ciclo de tratamiento, puede lavar la piel con agua fría si esta está enrojecida o la siente caliente.
- Recuerde que también tiene la opción de deslizar la placa de contacto con la piel en modo Ice Sense para aliviar la sensación de la piel caliente.
- No exponga al sol las zonas tratadas durante al menos 4 semanas antes y después del tratamiento. Proteja con loción SPF 30+ sin fragancia las áreas expuestas.

Zonas de Aplicación

Áreas del cuerpo: Brazos, Piernas, Abdomen

Zonas del rostro: Barbilla, Labio superior, Línea de la mandíbula

Zonas sensibles: Axilas, Bikini

1. Antes de comenzar el tratamiento, verifique si su color de piel es adecuado para aplicar:



Luego verifique su color de vello:



Para evitar reacciones cutáneas, y aun cuando le presentamos una tabla de intensidades de luz recomendadas según color de piel y vello, es imprescindible que siempre comience el primer ciclo de tratamiento en el nivel más bajo, en 1. Vaya aumentando la intensidad de uno en uno en la medida que vaya avanzando en el tratamiento.

La siguiente tabla es referencial en los que muestra el nivel de intensidad recomendado para la zona a tratar, y la cantidad de disparos por zona sugeridos.

Piel / Parte del cuerpo	I Blanca	II Marfil	III Beige	IV Morena	V Castaña Media	VI Castaña Oscura y Negra
Axila	Nivel4-6	Nivel3-6	Nivel2-5	Nivel2-4	Nivel1-3	—
Pecho	Repetir 3-4 veces	Repetir 3-4 veces	Repetir 3-4 veces	Repetir 3-4 veces	Repetir 2-3 veces	—
Espalda						
Brazos						
Piernas	Nivel4-6	Nivel3-6	Nivel2-5	Nivel2-4	Nivel1-3	—
Alrededor de la boca	Repetir 2-3 veces	Repetir 2-3 veces	Repetir 2-3 veces	Repetir 2-3 veces	Repetir 2-3 veces	—
Cara						
Bikini	Nivel2-6 Repetir 2-3 veces	Nivel2-5 Repetir 2-3 veces	Nivel1-4 Repetir 2-3 veces	Nivel1-4 Repetir 2-3 veces	Nivel1-3 Repetir 2-3 veces	—

*Cuando usa un alto nivel de intensidad, es apropiado reducir la cantidad de disparos. Después del tratamiento es normal el enrojecimiento de la piel, así como también el sentir un calor uniforme en la zona.

Precaución:

Este aparato no puede ser utilizado en personas con piel oscura tipo VI, vellos blancos, pelirrojos y grises en las zonas a tratar.

Tratamiento

1. Conecte el aparato a la corriente.
2. Exfolie la zona que va a depilar previamente rasurada.

Nota:

- No use depiladoras o cera.
- Si al afeitarse se hiere la zona generándose una herida, es muy probable que el tratamiento sobre esa zona sea incómoda y algo molesta.

3. Use lentes protectores mientras opere el aparato.

Precaución:

Nunca mire el aparato mientras emite los disparos de luz.

4. Seleccione el modo de disparo, continuo (C) o único (S).
5. Seleccione el nivel de intensidad.


Nota:

Al ir aumentando el nivel de intensidad, puede notar un efecto de más calor en la piel, pero nunca deberá ser doloroso.

6. Seleccione el modo Ice Sense si lo desea.
7. Posicione el aparato en 90° sobre la piel.

8. Emita disparos de luz en la zona que va a depilar.

Siga el siguiente diagrama:

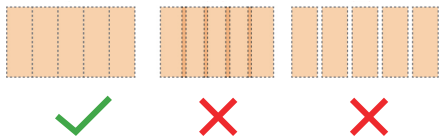

9. Realice los primeros 3 a 5 tratamientos cada 2 a 3 semanas

10. Los siguientes 6 a 8 tratamientos realícelos cada 4 a 6 semanas. Cuando el vello no vuelva a crecer, no necesita afeitarse para continuar con el tratamiento.

11. En periodo de mantenimiento, realice un tratamiento cada 2 a 3 meses, sólo en las zonas donde haya aparecido nuevamente vellos.

Nota:

- Los intervalos de tiempo pueden variar entre una persona y otra.
- Cuando el vello no crezca antes del siguiente ciclo de tratamiento, no será necesario afeitarse antes de iniciar el proceso. Esto podría suceder después del 4° o 5° ciclo.

9. GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años o hasta la vida útil 600.000 disparos.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.