

SIEGEN

www.siegen.cl



SIEGEN

**PEELING ULTRASÓNICO NANO SPRAY
SG 6150**



ÍNDICE

1. Introducción
2. Datos técnicos
3. Componentes del aparato
4. Instrucciones de seguridad importantes
5. Contraindicaciones
6. Instrucciones de carga
7. Instrucciones de uso
8. Limpieza
9. Garantía y condiciones generales

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro Peeling Ultrasónico Siegen es un limpiador facial y corporal que funciona con Ultrasonido de 25 KHz. Este tratamiento para la piel elimina la capa córnea, es decir, la capa más externa de la epidermis. Las ondas del ultrasonido penetran la piel, reactivando la generación de colágeno y eliminando las células que bloquean la oxigenación.

De esta forma logra limpiar el cutis, liberar los poros de suciedad, puntos negros y espinillas y reducir al máximo las imperfecciones del rostro, pudiendo mejorar el brillo y la aparición de pequeñas arrugas.

Trabaja con Spray Humectante que lanza micro partículas de agua a nuestro rostro durante la limpieza.

El uso de la corriente galvánica de lones positivos y negativos produce doble efecto, por un lado, ayuda a lograr una limpieza profunda en la piel y por otro, a la nutrición de ésta.

La electro-estimulación hace trabajar los músculos a través de pequeños impulsos de

micro-corriente consiguiendo que la piel se estire, corrigiendo líneas de expresión y logrando una piel tersa, firme y tonificada.

2. DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 6150

Bi-voltaje: 100V-240V~ 50/60 Hz

Uso: Recargable

Batería: DC 3,7V 500mAH


Tiempo de carga completa: 2 horas

Frecuencia Ultrasonido: 25 KHz

3. COMPONENTES DEL APARATO

1. Espátula
2. Estanque para agua
3. Botón encendido/apagado
4. Función Limpieza y Spray Humectante / Luz indicadora de carga
5. Función Nutrición
6. Función Lifting
7. Puerto de conexión para el cable con puerto USB
8. Tapa protectora de espátula

* Incluye: Cable USB y envase dosificador para rellenar el estaque con agua

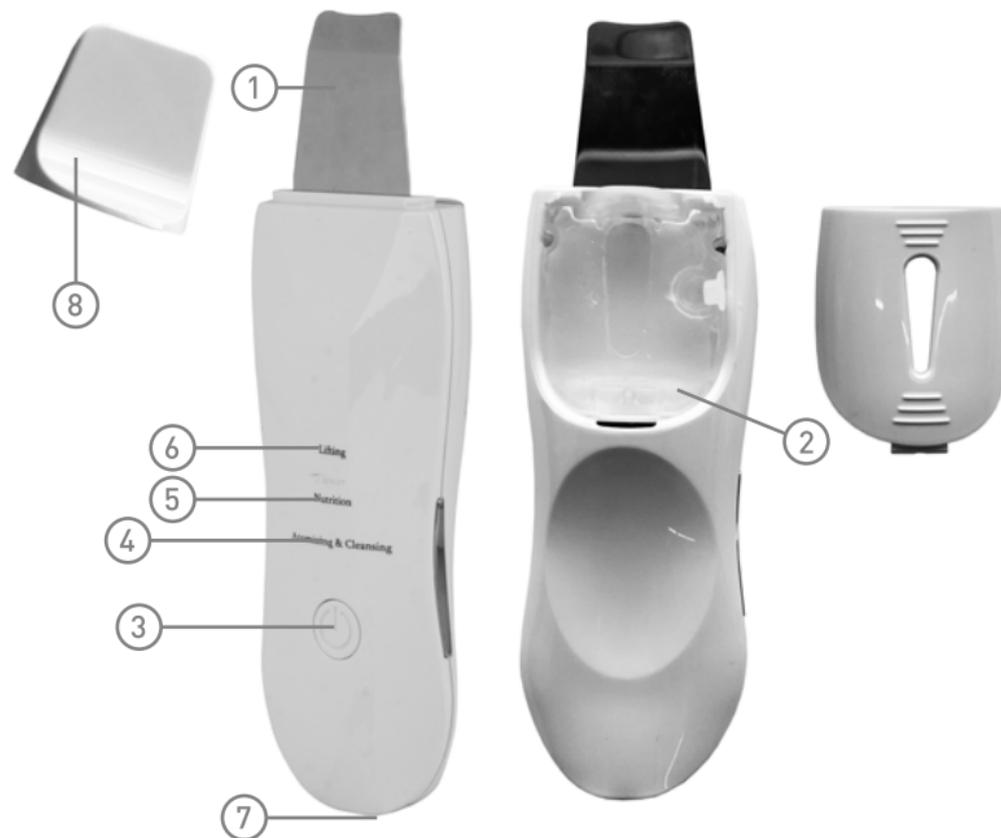

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato.
- 3.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 4.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 5.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 6.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 7.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 8.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

9.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

10.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

11.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

12.- Nunca guarde el aparato en lugares donde llegue luz del sol directamente, con mucha humedad, polvo o con altas temperaturas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0°C - 40°C.

13.- Evite golpear el aparato.

14.- Este aparato es sólo para uso doméstico.

5. CONTRAINDICACIONES

Este aparato no se puede utilizar en:

- Niños menores de 16 años de edad.
- Niños entre los 16 a 18 años, pueden usarlo sólo con el consentimiento y ayuda de los padres.
- Personas con dermatitis.
- Personas con eczema, folículos inflamados, heridas abiertas, herpes, abrasiones, hematomas en zonas a tratar.
- Personas con piel atópica.
- Personas con infección por hongos u otros.
- Personas con acné severo (deberá consultar con su médico).
- Personas con enfermedades cutáneas como cáncer de piel entre otros.
- Mujeres en periodo de lactancia o embarazo.
- Personas con historial de foto sensibilidad o diabetes.
- Personas con numerosos lunares atípicos en la zona a tratar.
- Desorden de colágeno o propenso a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.
- Desorden vascular, presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- Si le han operado en la zona a tratar.
- Si padece de epilepsia, diabetes, lupus eritematoso, porfiria o enfermedad cardiaca.
- Desorden sanguíneo.

- Si padece alguna enfermedad inmunodepresora, incluida el VIH.
- Sobre verrugas, tatuajes o maquillaje permanente.
- En párpados. No trate la cuenca del ojo ni alrededor del área del ojo.
- No trate en el cuero cabelludo.

ADVERTENCIA: Si no tiene seguridad de poder utilizar este aparato, le recomendamos que consulte con su médico.

6. INSTRUCCIONES DE CARGA

Nuestro Peeling Ultrasónico Siegen es recargable.

Antes de usarlo por primera vez, cargue el aparato completamente. El tiempo de carga de la primera vez será inferior al de la carga completa, ya que viene con algo de carga desde la fábrica.

Este aparato se carga conectándolo a algún dispositivo con puerto USB. Conecte el cable al puerto de conexión ubicado en la parte inferior del cuerpo del aparato. Luego conecte a un puerto USB. Mientras esté cargando el aparato, la luz indicadora de carga se encenderá.

PRECAUCIÓN:

Batería DC 3,7V 500mAH

Nunca use el aparato mientras esté cargando.

El tiempo de carga completa es de 2 horas.

NOTA: Cuando esté usando el aparato, un “beep” sonará indicando que el nivel de carga de batería está bajo. Cargue nuevamente el aparato.

7. INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: La espátula nunca debe permanecer inmóvil sobre la piel por más de 3 segundos. Debe mantener el aparato en constante movimiento.

Antes de comenzar con el proceso de limpieza, lave la piel y remueva todo el maquillaje.

1. Llene el estanque del aparato con agua. Deslice la tapa del estanque hacia arriba hasta que ésta se desmonte. Use el envase dosificador con agua para rellenar el estanque. El estanque tiene una pequeña tapa de goma que debe abrirse para incorporar el agua. Llene el estanque con el agua. Luego tape asegurándose que la tapa de goma quede bien puesta. Vuelva a colocar la tapa del estanque de la misma forma en que la retiró.
2. Presione el botón encendido/apagado 1 vez, la función del Spray Humedecedor comenzará a funcionar. Verá como el agua sale en forma de micro partículas de agua. Su piel la mantendrá hidratada. Aplique sobre la piel.
3. Presione el botón encendido/apagado 2° vez, la función del Spray Humedecedor y la función limpieza comenzarán a funcionar en forma combinada. Sentirá una vibración de ondas en forma continua.

Deslice la espátula sobre la piel en 45°, siempre el lado cóncavo hacia arriba para limpiar profundamente la suciedad de los poros y residuos de maquillaje. La vibración ultrasónica penetrará la piel activando la regeneración del colágeno y desintoxicando las células, mejorando la circulación sanguínea y eliminando las células muertas.

4. Presione el botón encendido/apagado 3° vez, la función nutrición comenzará a funcionar. La activación de los Iones ayuda a mejorar la absorción de nutrientes en la piel, favoreciendo los resultados de la aplicación de cremas de tratamiento e hidratación. Siga deslizando la espátula en 45° sobre la piel, con el lado cóncavo hacia arriba.

5. Presione el botón encendido/apagado 4° vez, la función Lifting comenzará a funcionar. La vibración de la onda se sentirá a otro ritmo. Esta función es combinada con electro-estimulaciones, las que conseguirán que la piel se estire atenuando líneas de expresión.

La piel se verá tonificada y tersa.

6. Presione el botón encendido/apagado 5° vez, el aparato se apagará.

7. El aparato tiene apagado automático después de 15 minutos, si usted no apagara su Peeling Ultrasónico, este apagado automático se activará y apagará el aparato por completo una vez transcurrido este tiempo.

8. LIMPIEZA

PRECAUCIÓN:

Antes de limpiar, asegúrese que el aparato está apagado y desenchufado.

Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido.

No use limpiadores químicos ni abrasivos para limpiar el aparato.

Nunca intente desarmar el aparato.

1. Para una vida útil prolongada, siempre limpie el aparato después de cada uso.
2. Limpie el aparato con un paño húmedo.
3. Pase suavemente un algodón con alcohol por la espátula para limpiar y desinfectar.

9. GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.

